


Mode d'emploi pour la reconstitution avec BAXJECT II

- Vérifier la date de péremption.
- Amener les flacons à température ambiante.
- Se laver les mains.
- Retirer les capsules des bouchons des flacons.
- Désinfecter chacun des deux bouchons avec un tampon d'alcool différent et laisser sécher.


C ETAPE 2 - Connecter le flacon de poudre

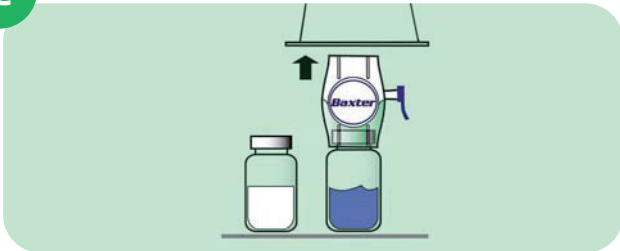

Saisir l'emballage par les rebords et le retirer de BAXJECT II, sans toucher la pointe exposée.

- **Ne pas retirer le capuchon bleu de BAXJECT II.**
- **Ne pas toucher la pointe exposée.**


D

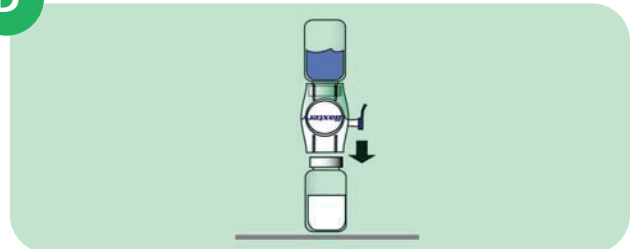

Retourner le flacon d'eau ppi connecté à BAXJECT II afin de le placer au-dessus du flacon de poudre. Introduire la pointe BLANCHE de BAXJECT II dans le centre du bouchon du flacon de poudre en appuyant vers le bas. Le vide va aspirer l'eau dans le flacon de poudre.

con de poudre, continuer par l'étape E.
document. (Il est acceptable qu'une légère quantité d'eau reste dans son flacon.)

G

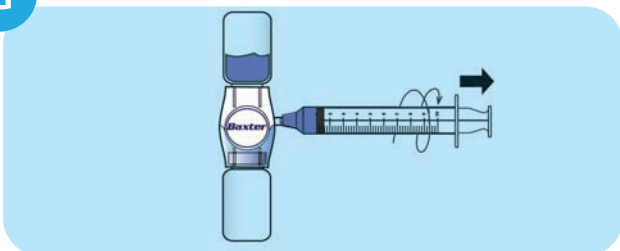

Retourner le système de façon à placer le flacon contenant la solution reconstituée au-dessus. Aspirer la solution de concentré dans la seringue en tirant DOUCEMENT sur le piston. Déconnecter la seringue. Jeter BAXJECT II de façon appropriée.

A NE PAS FAIRE :

- Retirer BAXJECT II de son emballage avant de percer le flacon d'eau
- Connecter BAXJECT II au "mauvais" flacon
- Enlever le bouchon de BAXJECT II avant l'étape F
- Injecter de l'air.

Si malgré ces recommandations vous êtes confronté à des erreurs de manipulation, reportez-vous aux SOLUTIONS, au verso de ce document.

nd flacon nécessite donc l'utilisation d'un deuxième BAXJECT II.

duit) est disponible sur demande.

ns le respect des règles d'asepsie.

Baxter